

KaVo MASTERtorque™ Turbine met Direct Stop Technology


Zeer krachtig. Zeer stil. Zeer ontspannen werken.

NIEUW

KaVo MASTERtorque™
met Direct Stop Technology

KaVo *Master Series*

Ware meesters sluiten geen compromissen.

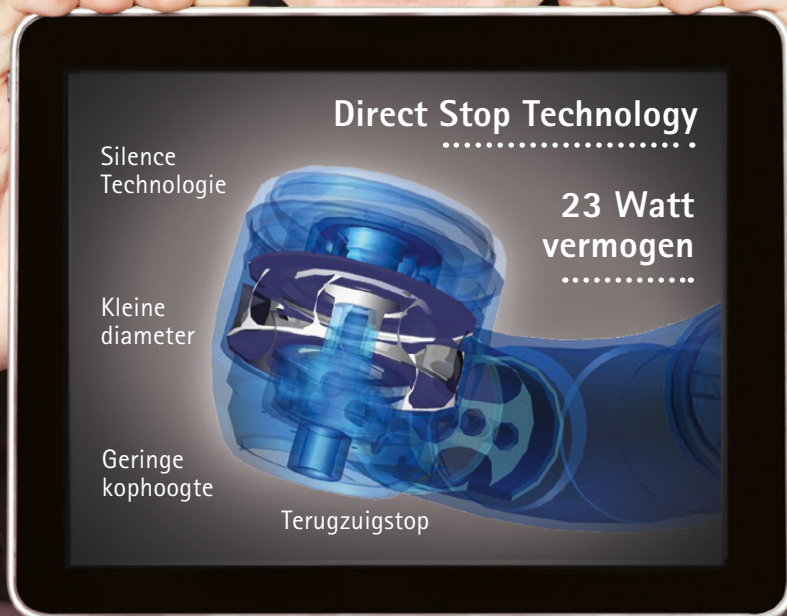

KaVo. Dental Excellence.

Zeer krachtig.

KaVo MASTERtorque – ervaar een volledig nieuwe dimensie van vermogen met een krachtig 23 Watt instrument. Optimale voorwaarden voor comfortabel en efficiënt prepareren.

- **Meer vermogen**
23 Watt topvermogen voor ca. 20 % meer draaivermogen*
- **Meer precisie**
Stabiël toerental en hoog draaivermogen tot in het hoogste vermogensniveau
- **Meer comfort**
Efficiënt en effectief prepareren ook bij geringe druk

* In vergelijking met KaVo GENTLEsilence 8000 B

Het maximum aan vermogen:

23 Watt


voor een stabiel toerental

Zeer stil.

De nieuwe KaVo MASTERtorque combineert Silence-Technology met verdere frequentieoptimalisatie. Optimale voorwaarden voor geluidsarm, aangenaam prepareren, zelfs bij volledig toerental en bij het uitlopen van de turbine.

- **Minder geluid**
Effectieve frequentieoptimalisatie zorgt voor een aangenaam turbinegeluid en een lage geluidsemissie van slechts 57 dB(A)

Geluidsvergelijking

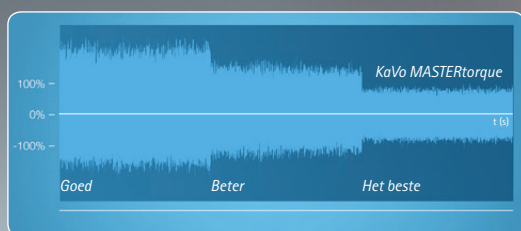

Geluidsvergelijking KaVo MASTERtorque met andere turbines



24 maanden
garantie

MASTERtorque
COLOR

Uiterst ontspannen werken – met Direct Stop Technology.

Snelle stop – met veiligheid. De nieuwe Direct Stop Technology (DST) beperkt de nalooptijd van de KaVo MASTERtorque met ca. 60 % en


topt binnen één seconde**. Optimale voorwaarden voor algeheel veilig en ontspannen werken.

** gemiddelde waarde

● Veilig prepareren


De innovatieve Direct Stop Technology stopt de boor binnen één seconde** en zorgt zo voor meer veiligheid bij de behandeling.

Nalooptijd van het boren

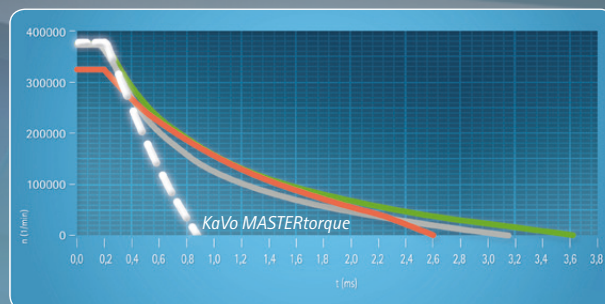

Nalooptijd ten opzichte van andere turbines

Terugzuiging aan de kop

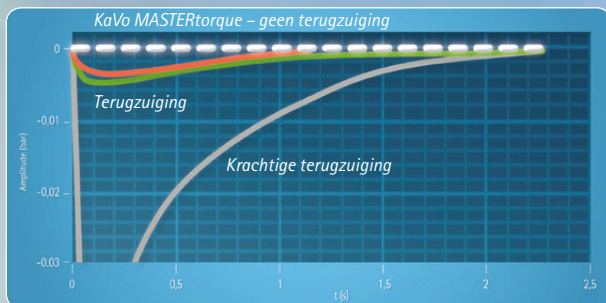

Terugzuiging resp. onderdruk op de kop

● Veilige hygiëne

De zeer korte nalooptijd voorkomt het terugzuigen van aerosoldampen en het inzuigen van deeltjes in de kogellagers voor duurzame hygiëne en een lange levensduur.

● Veilig sneller en efficiënter werken


DST maakt snel werken mogelijk door het snel tot stilstand komen van de boor. Bijvoorbeeld voor het controleren van de preparatie of voor het verwisselen van de boor.



KaVo. Dental Excellence.

Uitstekend zicht.

De compacte, ergonomische vervaardiging van de KaVo MASTERtorque en het unieke KaVo lichtconcept creëren de beste werk- en zichtomstandigheden op het preparatie gebied.

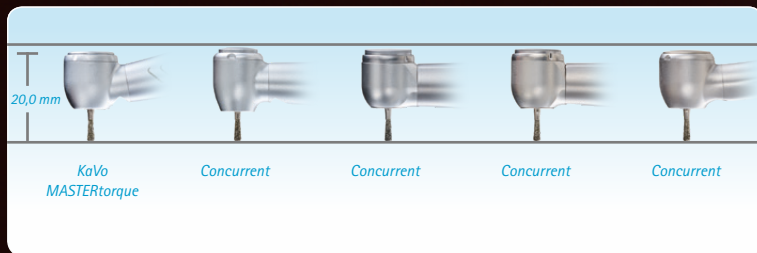

Kopgrootte ten opzichte van de concurrentie

Meer zien

- Gereduceerde diameter van de kop aan boorzijde. Kophoogte slechts 13,1 mm – bij 19 mm boor slechts 20 mm kophoogte.
- Met gepatenteerde KaVo 100°/19° kop-/kniehoekcombinatie.

Meer licht

- Het preparatie gebied is altijd optimaal belicht.
- Preparatie gebieden zijn tijdens het sprayen optimaal zichtbaar, licht- en sprayuitgang zijn schuin geplaatst.



Optimaal zicht door schuin geplaatste spray-lichtuitgang

Meer dan alleen maar een turbine

Dankzij de combinatie van 20% meer vermogen, gering gewicht en de innovatieve Direct Stop Technology is de KaVo MASTERtorque een echt alternatief voor de snelloper.



Speciale kleuredities
antraciet en bruin



KaVo. Dental Excellence.